



# КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

БЫТОВАЯ ХИМИЯ



ОЧИСТКА ВОДЫ



ПРОМЫШЛЕННОЕ  
ПРОИЗВОДСТВО



МЕДИЦИНА



ДЕЗИНФЕКЦИЯ, СТЕРИЛИЗАЦИЯ, ГИГИЕНА

### *Группа компаний «Континент» — надежность, стабильность, стремление к совершенству!*

«Континент» один из ведущих отечественных производителей средств дезинфекции, стерилизации, профессиональных и бытовых моющих средств, химии для бассейнов. Дата основания компании – 2000 год, на сегодняшний день компания поставляет свою продукцию во все регионы РФ и в некоторые страны СНГ.

#### ● СОЗДАЕМ

Создание новых препаратов проводится совместно с ведущими научно-исследовательскими институтами страны на основе собственных инновационных разработок, предназначенных для дезинфекции, стерилизации, профессиональной уборки промышленных и бытовых объектов любой сложности.

#### ● ПРОИЗВОДИМ

Мы постоянно совершенствуем свою технологию, используем для изготовления продукции только высококачественное сырье ведущих мировых производителей. Современное, технологичное и автоматизированное оборудование позволяет производить более 100 тонн одного наименования продукции в месяц. Весь цикл производства организован в соответствии с международными стандартами ISO 9001:2008 и ISO 13485:2003

#### ● ВНЕДРЯЕМ

Ключевой этап деятельности нашего предприятия – внедрение средств дезинфекции, стерилизации, бытовой и профессиональной химии для различных областей применения в медицине, быту, промышленности.

Этот этап включает в себя консультацию, расчет потребности для предприятия, помочь в подготовке договоров или аукционной документации и дальнейшее сопровождение клиента. Приобретая продукцию у производителя без посредников, Вы гарантированно получаете качественную продукцию по минимальным ценам на взаимовыгодных условиях.

#### ● ПРЕИМУЩЕСТВА:

- индивидуальный подход к каждому клиенту
- строгий контроль качества сырья и готовой продукции
- отсутствие прямых аналогов нашей продукции
- анализ качества на базе аккредитованных лабораторий
- помочь и сопровождение при выборе и использовании
- соотношение высокого качества продукции по доступной цене



С 2013 года компания «Континент» ежемесячно перечисляет денежные средства от продажи нашей продукции в фонд помощи детям с онкологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь».

Выражаем благодарность всем, кто приобретает нашу продукцию и помогает детям. Подробности на сайте [www.podari-zhizn.ru](http://www.podari-zhizn.ru) в разделе «совместные акции» и «подробный отчет».

## ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА



## АКВАЛАЙТ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ



## БАРЬЕР

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

**Состав:**

Активный хлор в виде координационно-связанного неорганического комплекса; ингибиторы коррозии, эмульгаторы и функциональные компоненты.

**Свойства:**

- Прозрачная жидкость со слабым запахом хлора
- Четвертый (самый низкий) класс опасности
- Стабильно работает даже при минимальных концентрациях рабочих растворов
- Хорошо отбеливает и не портит загрязненное белье
- Способно противостоять резистентности микроорганизмов
- Применяется в присутствии пациентов
- Не требует смывания рабочего раствора после дезинфекции поверхностей
- Многократное использование рабочих растворов
- Срок годности рабочего раствора 14 суток
- Сохраняет свои свойства после замораживания и оттаивания

**Активность:**

- Гр + бактерии (включая микобактерии туберкулеза);
- Гр – бактерии, в т.ч. возбудители анаэробной инфекции;
- Вирусы (включая адено-вирусы, все типы вирусов гриппа, полиомиелита, энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, «атипичной пневмонии» (SARS), ВИЧ-инфекции и др.), патогенных грибов рода Candida, Trichophyton.

**Срок годности:** 3 года**Форма выпуска:** 5 л**Состав:**


2,6% дидецилдиметиламмоний хлорид (ЧАС) и 1,8% глутарового альдегида (ГА), функциональные добавки;

**Свойства:**

- Прозрачная жидкость бесцветного или слегка желтого цвета
- Обладает хорошими моющими и дезинфицирующими свойствами
- Средство «Барьер» (в виде концентрата) при внутрижелудочном введении и нанесении на кожу относится к 4 классу мало опасных веществ; при введении в брюшную полость мышей относится к 4 классу малотоксичных веществ
- Обеспечивает высокое качество предстерилизационной очистки
- Эффективно при ультразвуковой обработке
- Не обладает аллергенной активностью
- Не обладает коррозионной активностью
- Срок годности рабочих растворов – 14 суток
- Сохраняет свои свойства после замораживания и оттаивания

**Активность:**

- Грамотрицательные и грамположительные бактерии (включая возбудителей туберкулеза)
- Вирусы (гепатиты, ВИЧ, полиомиелит),
- Патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон

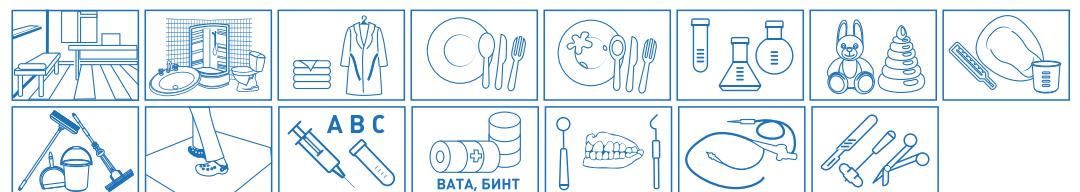**Срок годности:** 5 лет**Форма выпуска:** 1л, 5л

## БАРЬЕР +

ДЕЗИНФЕКЦИЯ  
СТЕРИЛИЗАЦИЯ  
ДВУ

**Состав:**

Полимер гуанидина-2%, смесь ЧАС-дидецилдиметиламмоний хлорид и алкилдиметилбензиламмоний хлорид-суммарно 1,5%, молочная кислота-0,5%; кроме того, в состав входят функциональные добавки и ингибиторы коррозии.

**Свойства:**


- Обладает отличными моющими, дезинфицирующими и дезодорирующими свойствами
- «Барьер+» является ДВУ и стерилизантом и идеально подходит для современных эндоскопов, и дорогостоящих изделий медицинского назначения
- Состав подобран с учетом свойств самых дорогих материалов, используемых в эндоскопии и в современной медицине, что исключает любые неприятности, связанные с дезинфекцией эндоскопов и любого дорогостоящего инструментария дешевыми отечественными препаратами
- По всем основным режимам «Барьер+» имеет самое широкое время экспозиции от 5 до 90 минут
- Средство «Барьер+» относится к 4 классу токсичности
- Применяется в присутствии пациентов
- Не вызывает аллергии
- Срок годности рабочего раствора – 28 суток
- Сохраняет свои свойства после замораживания и оттаивания

**Активность:**

- Грамотрицательные бактерии (включая синегнойную палочку)
- Грамположительные бактерии (включая возбудителей туберкулеза)
- Вирусы
- Патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон
- Плесневелых грибов
- Возбудителей ВБИ и анаэробных инфекций
- Средство обладает спороцидным действием.

**Срок годности:** 5 лет

**Форма выпуска:** 1л, 5л

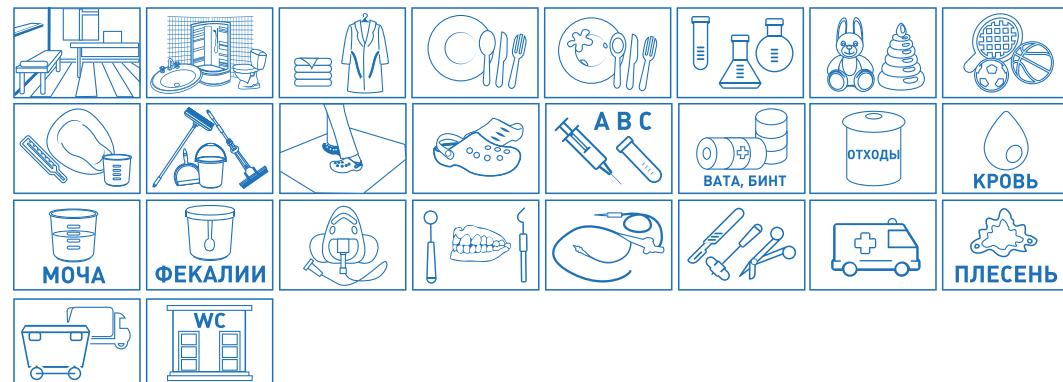

## ГРАНД

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

**Состав:**

Третичные амины, изопропиловый спирт, ингибиторы коррозии и функциональные добавки

**Свойства:**

- Не требуется смывание рабочего раствора после дезинфекции
- Многократное использование рабочих растворов
- Применяется в присутствии пациентов
- Не фиксирует органику
- Не вызывает коррозии
- Не портит поверхности и ткани
- Срок годности рабочего раствора – 30 суток
- Сохраняет свои свойства после замораживания и оттаивания

**Активность:**

- Грамположительные бактерии, (в т.ч. микобактерии туберкулеза)
- Грамотрицательные бактерии, (в т.ч. синегнойная палочка, S. Typhimurium, возбудители анаэробной инфекции, споры бактерий)
- Вирусы, (в т.ч. аденоизуры, гриппа H5N1, гриппа H1N1, парагриппа, ОРВИ, SARS, энтеровирусы, ротавирусы, вирусы гепатитов A, E, B, C, D, G, герпеса, ВИЧ, полиомиелита.)
- Грибы рода Кандида, Трихофитон, плесневелые грибы.
- Цисты и ооцисты простейших, яйца и личинки гельминтов.

**Срок годности:** 5 лет

**Форма выпуска:** 1л, 5л



## КОНТАКТ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ  
ДВУ



## Состав:

Триамин, ЧАС 5 поколения, смесь ЧАС 4 поколения, полимер гуанидина, изопропанол, энзимы, а также функциональные добавки и ингибиторы коррозии;

## Свойства:


- «Контакт» является самым экономичным дезинфектантом по всем режимам как среди не хлорсодержащих, так и среди большинства хлорсодержащих препаратов.
- Уникальный состав препарата, в который входят все современные ДВ (более 7), за исключением ГА, позволяет проводить дезинфекцию практически без ротации, не оставляя шансов микроорганизмам с самой высокой степенью резистентности.
- Рекомендован для дезинфекции в отделениях неонатологии
- Не вызывает аллергических реакций применяется в присутствии пациентов
- По основным режимам имеет широкое время экспозиции от 5 до 90 минут
- Препарат не фиксирует органические загрязнения
- Срок годности рабочих растворов – 28 суток
- Сохраняет свои свойства после замораживания и оттаивания

## Активность:

- Грамотрицательные бактерии (включая синегнойную палочку)
- Грамположительные бактерии (включая возбудителей туберкулеза)
- Вирусы
- Патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон
- Плесневых грибов
- Возбудителей ВБИ и анаэробных инфекций

Срок годности: 5 лет

Форма выпуска: 1л, 5л

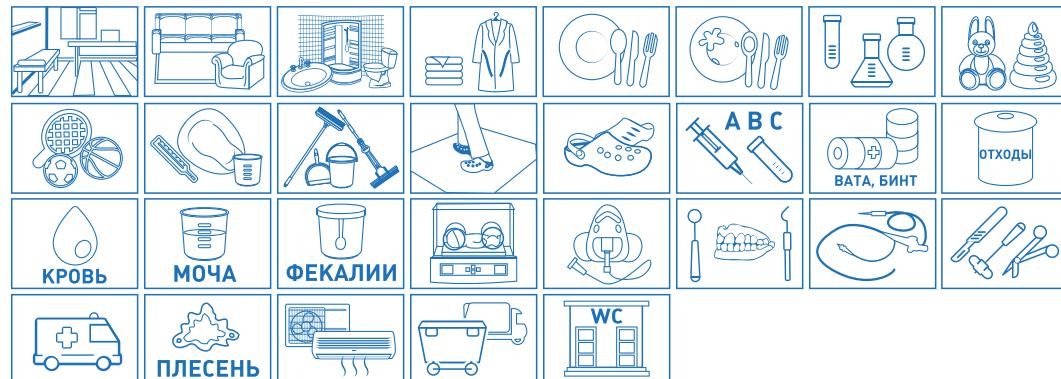

## ЛАЙК

ДЕЗИНФЕКЦИЯ  
ООИ



## Состав:

Комплекс четвертичных аммониевых соединений, ингибиторы коррозии, синергисты и функциональные добавки, pH 1% водного раствора 7,0

## Свойства:


- Применяется в присутствии пациентов
- Смыывание рабочего раствора после дезинфекции не требуется
- Многократное использование рабочих растворов
- Биоразлагаем и экологически безопасен
- Не фиксирует органику
- Не вызывает коррозии
- Не портит поверхности и ткани
- Срок годности рабочих растворов – 30 суток
- Сохраняет свои свойства при замораживании и оттаивании

## Активность:

- Грамположительные бактерии (в т.ч. микобактерии туберкулеза)
- Грамотрицательные бактерии (в т.ч. возбудителей легионеллеза)
- Вирусы (в т.ч. адено-вирусы, гриппа H5N1, гриппа H1N1, парагриппа, ОРВИ, SARS, энтеровирусы, ротавирусы, вирусы гепатитов А, Е, В, С, D, G, герпеса, ВИЧ, полиомиелита)
- Грибы рода Кандида, Трихофитон, плесневые грибы
- Особо опасные инфекции (чума, холера, туляремия и др.)

Срок годности: 5 лет

Форма выпуска: 1л, 5л

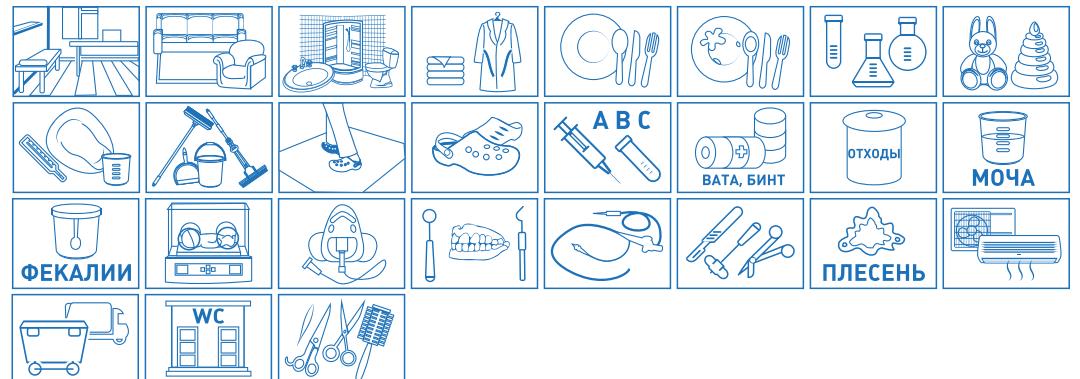

## МЕРИДИАН

ДЕЗИНФЕКЦИЯ  
СТЕРИЛИЗАЦИЯ  
ДВУ

**Состав:**


Третичные амины, ЧАС 4 поколения, ЧАС 5 поколения, полимер гуанидина, изопропиловый спирт, ингибиторы коррозии, синергисты и функциональные добавки.

**Свойства:**

- Обладает моющими свойствами
- Применяется в присутствии пациентов
- Не требуется смывание рабочего раствора
- Биоразлагаем и экологически безопасен
- Не фиксирует органику
- Не вызывает коррозии
- Не портит поверхности и ткани
- 4 класс малоопасных веществ
- Срок годности рабочего раствора – 35 суток
- Сохраняет свои свойства при замораживании и оттаивании

**Активность:**

- Грамположительные бактерии (в т.ч. микобактерии туберкулеза)
- Гр- бактерии (в т.ч. синегнойная палочка возбудители анаэробной инфекции, споры бактерий)
- Вирусы (в т.ч. аденоовириусы, гриппа H5N1, гриппа H1N1, парагриппа, ОРВИ, SARS, энтеровириусы, ротавириусы, вирусы гепатитов A,E,B,C,D,G, герпеса, ВИЧ, полиомиелита)
- Грибы рода Кандида, Трихофитон, плесневые грибы.
- Цисты и ооцисты простейших, яйца и личинки гельминтов.

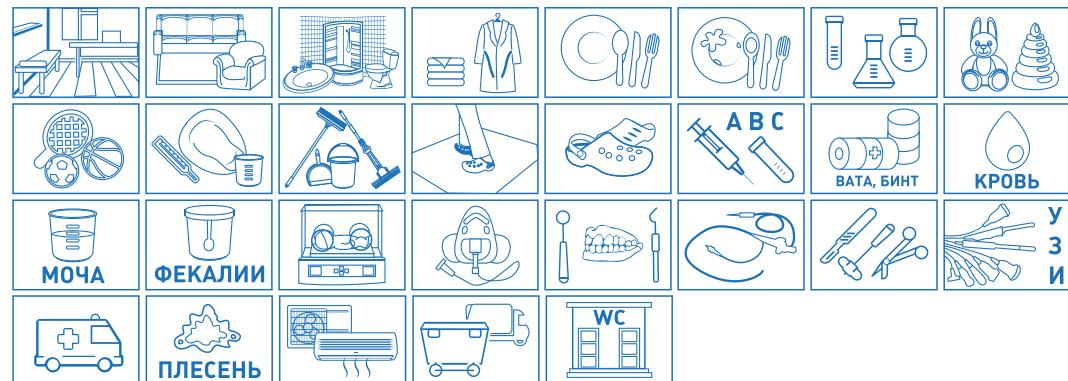**Срок годности:** 5 лет**Форма выпуска:** 1 л

## НОВИС

ДЕЗИНФЕКЦИЯ  
СТЕРИЛИЗАЦИЯ  
ДВУ

**Состав:**


Глутаровый альдегид, ЧАС 5 поколения, изопропиловый спирт, ингибиторы коррозии и функциональные добавки

**Свойства:**

- Обладает моющими свойствами
- Не требуется смывание рабочего раствора
- 4 класс малоопасных веществ
- Применяется в присутствии пациентов
- Не вызывает коррозии
- Не портит поверхности и ткани
- Срок годности рабочего раствора – 30 суток
- Сохраняет свои свойства при замораживании и оттаивании

**Активность:**

- Грамположительные бактерии (в т.ч. микобактерии туберкулеза)
- Грамотрицательные бактерии (в т.ч. синегнойная палочка, возбудители анаэробной инфекции, споры бактерий)
- Вирусы (в т.ч. аденоовириусы, гриппа H5N1, гриппа H1N1, парагриппа, ОРВИ, SARS, энтеровириусы, ротавириусы, вирусы гепатитов A,E,B,C,D,G, герпеса, ВИЧ, полиомиелита)
- Грибы рода Кандида, Трихофитон, плесневые грибы.
- Цисты и ооцисты простейших, яйца и личинки гельминтов.

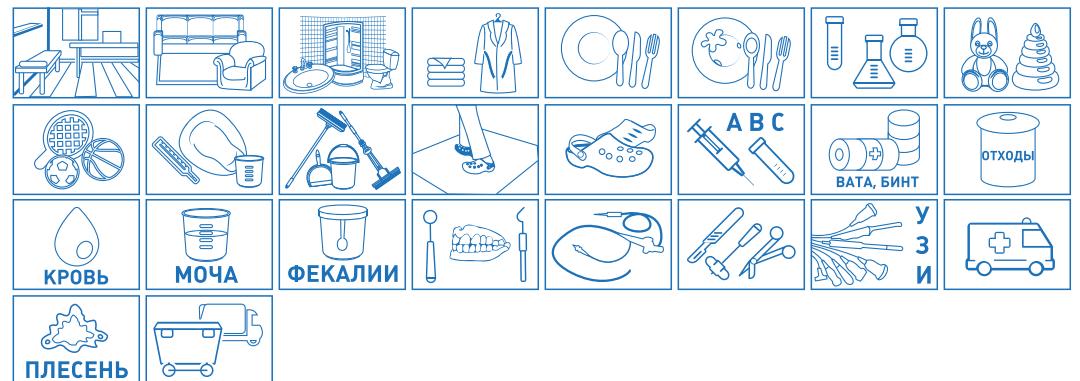**Срок годности:** 5 лет**Форма выпуска:** 1л, 5л

## ПАРАДОКС

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
СТЕРИЛИЗАЦИЯ
ДВУ
ООИ

**Состав:**

Пероксид водорода, надускусная кислота, ингибиторы коррозии, синергисты и функциональные компоненты

**Свойства:**

- Не требует смывания рабочего раствора после дезинфекции поверхностей
- Применяется в присутствии пациентов
- Многократное использование рабочих растворов
- Биоразлагаем и экологически безопасен
- Срок годности рабочего раствора 7 суток
- Сохраняет свои свойства после замораживания и оттаивания

**Активность:**

- Грамположительные бактерии (включая микобактерии туберкулеза)
- Грамотрицательные бактерии (в т.ч. возбудители анаэробной инфекции)
- Возбудителей особо опасных инфекций (чума, холера, туляремия, сибирская язва, анаэробных инфекций)
- Вирусов (включая адено-вирусы, все типы вирусов гриппа, в т.ч. вирусов «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа A/H1N1, вирусов ЕCHO, Коксаки, цитомегалии, полиомиелита, норовирусы, парагриппа, возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, «атипичной пневмонии» (SARS), ВИЧ-инфекции и др.)
- Патогенных грибов рода Candida, Trichophyton и плесневелых грибов.

**Срок годности:** 1 год

**Форма выпуска:** 5 л



## СЛАЙТ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ДВУ

**Состав:**

Триамин, смесь ЧАС 5 поколения и ЧАС 4 поколения, полимер гуанидина, изопропанол, феноксиэтанол, энзимы, а также функциональные добавки и ингибиторы коррозии;

**Свойства:**



- Относится к 4 классу малоопасных веществ
- Средство не обладает кожно-резорбтивной и сенсибилизирующей активностью
- Средство оказывает умеренное раздражающее действие на кожу и на слизистые оболочки глаза
- Препарат не фиксирует органические загрязнения
- Разрешен к применению в отделении неонатологии
- Не вызывает аллергических реакций
- Применяется в присутствии пациентов
- Срок годности рабочих растворов – 30 суток
- Сохраняет свои свойства после замораживания и оттаивания

**Активность:**

- Грамотрицательные бактерии (включая синегнойную палочку)
- Грамположительные бактерии (включая возбудителей туберкулеза)
- Вирусы
- Патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон,
- Плесневелых грибов,
- Возбудителей ВБИ и анаэробных инфекций.
- Возбудитель паразитарных болезней

**Срок годности:** 5 лет

**Форма выпуска:** 1л, 5л

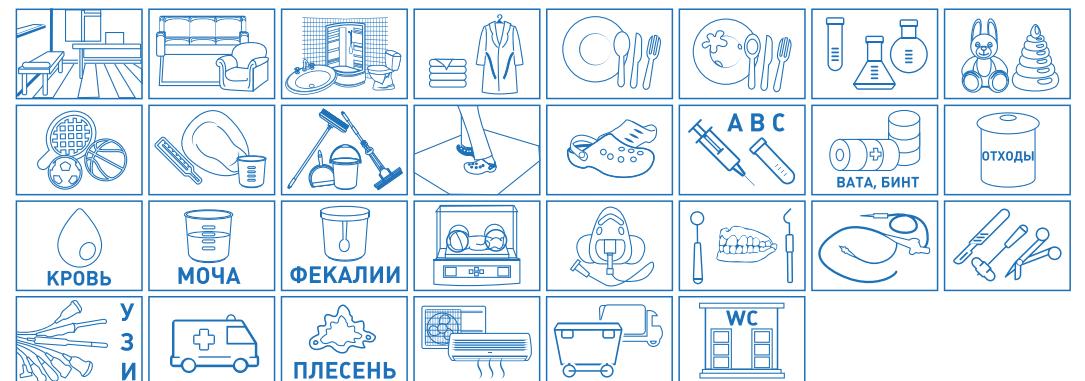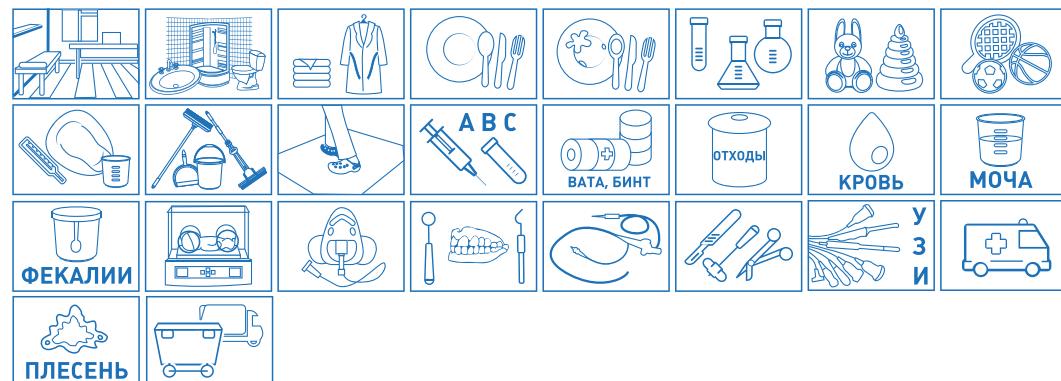

# **ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА (ТАБЛЕТКИ И ГРАНУЛЫ)**



## КОНТИТАБС

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

**Состав:**

Гуанидины, третичные амины, ЧАС, ингибиторы коррозии и функциональные добавки.

**Свойства:**

- Применяется в присутствии пациентов
- Не требует смывания рабочего раствора после дезинфекции поверхностей
- Биоразлагаем и экологически безопасен
- Многократное использование рабочих растворов
- Срок годности рабочего раствора 28 суток
- Срок годности средства 5 лет

**Активность:**

- Грамположительные бактерии (включая микобактерии туберкулеза)
- Грамотрицательные бактерии (в т.ч. возбудители анаэробной инфекции)
- Вирусы (включая адено-вирусы, все типы вирусов гриппа, в т.ч. вирусов «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа A/H1N1, парагриппа, возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, «атипичной пневмонии» (SARS), ВИЧ-инфекции и др.)
- Патогенных грибов рода Кандида
- Трихофитон и плесневельных грибов

**Срок годности:** 5 лет

**Форма выпуска:** упаковка 700 гр (табл. 2гр), упаковка 200 гр (табл. 2гр), блистер 10 шт. (табл. 2гр), упаковка 150 гр. (табл. 0,5 гр.)



## КОНТИ-ХЛОР

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

ООИ

**Состав:**

Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты; функциональные добавки.

**Описание:**

- Таблетки или гранулы белого цвета с запахом хлора.
- Средство хорошо растворимо в воде.
- Водные растворы прозрачны с возможной легкой опалесценцией, имеют запах хлора.
- Для сочетания процесса дезинфекции и очистки к растворам препарата добавляют моющие средства, разрешенные для применения в ЛПУ.
- Водные растворы не портят обрабатываемые поверхности из дерева, стекла, полимерных материалов, а также посуду, игрушки, изделия медицинского назначения и предметы ухода за больными из коррозионностойких металлов, стекла, резин и пластмасс.
- Срок годности в упаковке производителя – 5 лет
- Срок годности рабочего раствора – 7 суток

**Активность:**

- В отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза);
- Вирусов (включая адено-вирусы, все типы вирусов гриппа, в т.ч. вирусов «птичьего» гриппа A (H5N1), «свиного» гриппа A (H1N1), парагриппа, возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусов, ротавирусов, вируса полиомиелита, вирусов энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, «атипичной пневмонии» (SARS), ВИЧ и др.)
- Грибов рода Кандида и Трихофитон.

**Срок годности:** 5 лет

**Форма выпуска:** 1 кг, блистер 10 шт. (табл. 3,4 гр)



## КОЖНЫЕ АНТИСЕПТИКИ И САЛФЕТКИ



## КОНТИСЕПТ

**Состав:**

Изопропиловый спирт - 50%, 2-феноксиэтанол, функциональные добавки

**Свойства:**

- 4 класс токсичности
- Средство обладает пролонгированным антимикробным действием в течении 3 часов
- Не портит и не обесцвечивает обрабатываемые объекты
- Сохраняет свои свойства после замораживания и оттаивания

**Активность:**

- Грамотрицательные бактерии (включая *Ps. aeruginosa*)
- Грамположительные бактерии (включая микобактерии туберкулеза)
- Фунгицидная активность (кандидозы, дерматофитии)
- Вирулицидные свойства (включая аденонырусы, все типы вирусов гриппа, в т.ч. вирусов «птичьего» гриппа A (H5N1), «свиного» гриппа A (H1N1), парагриппа, возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, «атипичной пневмонии» (SARS), ВИЧ-инфекции и др.)

**Срок годности:** 5 лет

**Форма выпуска:** 125мл, 0,75мл, 1л

**В качестве кожного антисептика:****В качестве дез. средства:**

## КОНТИСЕПТ ФОРТЕ

**Состав:**

Изопропиловый спирт – 70%, 2-феноксиэтанол, функциональные добавки

**Свойства:**



- 4 класс токсичности
- Обладает пролонгированным антимикробным действием в течении 3 часов

**Активность:**

- Бактерицидная активность в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей туберкулеза)
- Вирулицидной (в т.ч. в отношении возбудителей полиомиелита, парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции, адено-новирусной инфекции и проч.)
- Фунгицидной активностью в отношении патогенных грибов (в т.ч. возбудителей кандидозов и дерматофитий)

**Срок годности:** 5 лет

**Форма выпуска:** 1л, 125мл

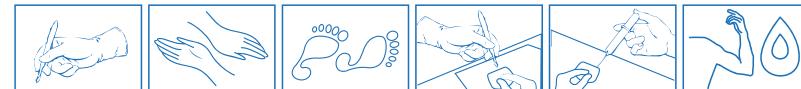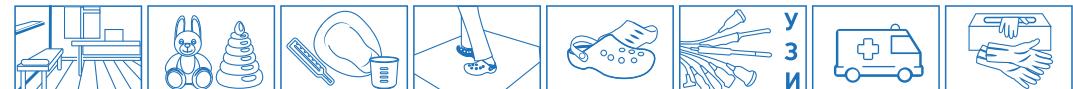**В качестве кожного антисептика:****В качестве дез. средства:**

## КОНТИСЕПТ ФОРТЕ САЛФЕТКИ

**Состав:**

Изопропиловый спирт – 70%, 2-феноксиэтанол, функциональные добавки

**Свойства:**


- 4 класс токсичности

**Активность :**

- Грамотрицательные и грамположительные бактерии (включая возбудителей туберкулеза)
- Виулицидной (в т.ч. в отношении возбудителей полиомиелита, при парентеральных гепатитах, ВИЧ-инфекции, аденоовирусной инфекции и проч.)
- Фунгицидной активностью в отношении патогенных грибов (в т.ч. возбудителей кандидозов и дерматофитий)

**Срок годности:** 5 лет

**Форма выпуска:** туба №60, индивидуальная упаковка 200x185мм, индивидуальная упаковка 65x90мм

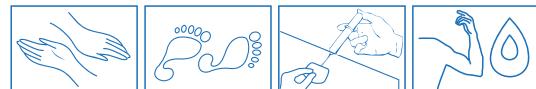**В качестве кожного антисептика:****В качестве дез. средства:**

## ОКСИЛОСЕПТ

**Состав:**

Полимер гуанидина - 0,7%, 2-феноксиэтанол - 0,02%, вода, функциональные добавки

**Свойства:**

- 4 класс токсичности


• Средство обладает пролонгированным бактерицидным действием в течении 3 часов

**Активность:**

- Грамотрицательные бактерии (включая Ps. Aeruginosa)
- Грамположительные бактерии (включая микобактерии туберкулеза)
- Фунгицидной активностью (кандидозы, дерматофитии)
- Виулицидными свойствами (включая аденоовириусы, все типы вирусов гриппа, в т.ч. вирусы «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа A/H1N1, парагриппа, возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровириусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, «антиной пневмонии» (SARS), ВИЧ-инфекции и др.)

**Срок годности:** 5 лет

**Форма выпуска:** 1л, 0,75л, 125 мл

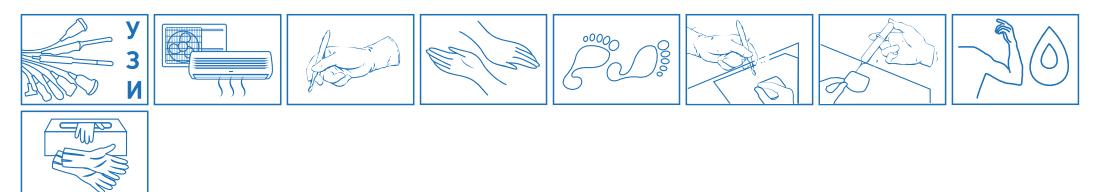

## ЖИДКОЕ МЫЛО



## МИЛИС

**Состав:**

Вода, лауретсульфат натрия, кокоамидопропил бетаин, смесь глицеринов, алкил локтат, додецилдипропилен три-амин, метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолинон, хлорид натрия парфюмерная композиция, а так же функциональные добавки.

**Свойства:**

- Обладает антимикробными свойствами.
- Имеет оптимальное для кожи значение pH.
- Смягчает и увлажняет кожу.
- Оказывает противовоспалительное и ранозаживляющее действие.
- Не вызывает сухости кожи при продолжительном использовании.

**Срок годности:** 3 года

**Форма выпуска:** 0,5л; 1л; 5л



## МИЛИС ФОРТЕ

**Состав:**

Вода, третичные амины, смесь ПАВ и другие функциональные добавки, pH-5,5-6,5

**Свойства:**

- Обладает моющими, смягчающими и увлажняющими свойствами
- Имеет оптимальное для кожи значение pH
- Не вызывает сухости кожи при продолжительном использовании
- Оказывает противовоспалительное и ранозаживляющее действие.

**Активность:**

- Обладает бактерицидной (включая микобактерии туберкулеза)
- Вирусицидной
- Фунгицидной активностью в отношении грибов рода Candida и Trichophyton

**Срок годности:** 3 года

**Форма выпуска:** 0,5л, 1л, 5л



	Поверхности в помещениях		Контейнеры для сбора и удаления медицинских отходов		Плесень
	Мягкие поверхности		Дезинфекция крови и биологических выделений		Дезинфекция воздуха, систем вентиляции и кондиционирования
	Санитарно-техническое оборудование		Моча		Дезинфекция, чистка, мойка и дезодорирование мусороуборочного оборудования
	Белье		Фекалии		Автономные и биотуалеты
	Посуда		Дезинфекция кувезов и приспособлений к ним		Инструменты парикмахерские, салонов красоты и маникюрных и педикюрных кабинетов и пр.
	Посуда с остатками пищи		Приспособления наркозно-дыхательной аппаратуры и анестезиологического оборудования		Дезинфекция яиц
	Лабораторная и аптечная посуда		Стоматологические инструменты / материалы		Руки хирурга
	Игрушки		Эндоскопы и инструменты к эндоскопам		Руки
	Спортивный инвентарь		Хирургические инструменты		Ступни ног
	Предметы ухода за больными		Дезинфекция высокого уровня		Операционное поле
	Уборочные материалы и инвентарь		Стерилизация		Инъекционное поле
	Резиновые и полипропиленовые коврики		Особо опасные инфекции		Обработка локтевого сгиба
	Дезинфекция обуви		Вакцина против туберкулеза		Перчатки
	Дезинфекция медицинских отходов		Датчики УЗИ		Тест полоски
	Медицинские отходы: перевязочные материалы		Санитарный транспорт		

## ДЛЯ ЗАМЕТОК

## ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК



(495)739-84-37

[www.k-dez.ru](http://www.k-dez.ru)

[info@k-dez.ru](mailto:info@k-dez.ru)

1 рубль с каждого литра будет  
направлен на помощь детям с онкологическими  
и иными тяжелыми заболеваниями.  
Подробности : [www.k-dez.ru](http://www.k-dez.ru)



Твои при нты!